


miyo[®]
liquid ceramic

miyo[®]
PINK[®]
liquid ceramic

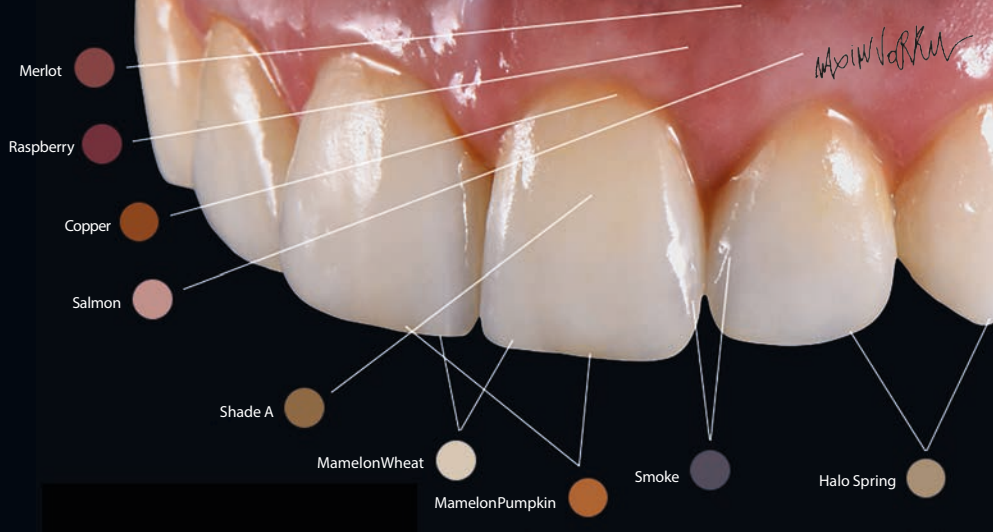

Information produit français

Stratification esthétique

Jensen propose actuellement deux kits de finition esthétique MiYO*: Système esthétique pour dents MiYO et Gingival esthétique rose MiYO Système pour les tissus.


Les deux systèmes constituent un système de finition unique composé de matériaux de couche opalescents et fluorescents en pâte pour la coloration, la structuration et le glaçage.

Avec MiYO, vous pouvez facilement et rapidement obtenir des résultats esthétiques élaborés, comparables aux restaurations obtenues par stratifications dans le même temps qu'il faudrait si vous deviez simplement réaliser une coloration de surface.

MiYO Color se compose de différents types de couleurs auto-glaçantes avec différents niveaux de translucidité, chacune étant spécialement formulée pour reproduire la couleur et la structure des dents, des tissus naturels, telles que la translucidité des bords libres, mamelons, fêlures, colorations et le tissu gingivaux.

Sur MiYO Color, nous superposons la structure MiYO. Avec MiYO Structure, vous pouvez créer de la profondeur, de la vitalité et de la texture dans l'émail et les tissus naturels, dans des épaisseurs très faible de 0,1 mm à 0,2 mm. Dù à la grande stabilité, les structures de surface individuelles peuvent facilement être intégrés dans la pâte et travaillées avec un pinceau. La température de cuisson basse ne modifie pas les caractéristiques de la surface, donc des résultats fiables et esthétiques sont obtenus avec une ou deux cuissons.

MiYO AVANTAGES:

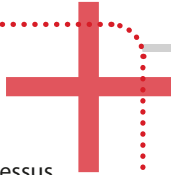- 
- + Des résultats fiables à chaque fois
 - + Pâtes prêtes à l'emploi et facile à manipuler
 - + Économie et gain de temps grâce à des processus de travail rapides
 - + MiYO Color avec une fluorescence et une opacité parfaitement ajustées pour le contraste et la profondeur
 - + MiYO Structure - pâtes de structure unique
 - + L'indice de réfraction naturel de la structure MiYO est visible sur les couronnes monolithiques à partir d'une épaisseur de couche 0,1 mm
 - + Haute stabilité de la couleur
 - + Retrait minimal
 - + Résultats esthétiques détaillés en contrôlant la forme, la surface, et la structure avant le cycle de cuisson

MiYO EST UTILISABLE POUR:

- Full Zircon
- Dioxyde de zircon
- Disilicate de lithium
- Stratification sur armatures Zircon (ex. InSync Zr)
- Céramo-métallique (ex. InSync MC)
- Pressée sur armature Zircon

MiYO PINK EST UTILISABLE POUR:


- Full Zircon
- Dioxyde de zircon
- Disilicate de lithium
- Stratification sur armatures Zircon (ex. InSync Zr)
- Céramo-métallique (ex. InSync MC)



1 MiYOCOLOR



Forme, couleur et résultats différents à partir d'une base.

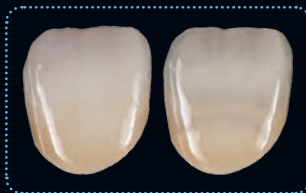

Passer d'une valeur haute à une valeur basse grâce aux MiYO Color Storm et Smoke.



De A3 vers A1 en utilisant MiYO Color Lumin.

2 MiYOSTRUCTURE




Travail de l'état de surface

Avant cuisson


Après cuisson



1 MiYO PINK COLOR

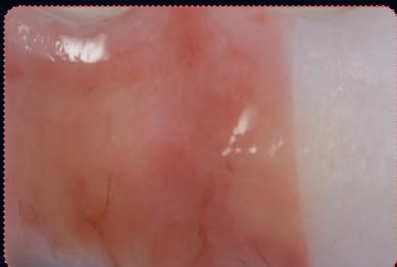


MiYO pink Color: Possibilités illimitées pour une conception.

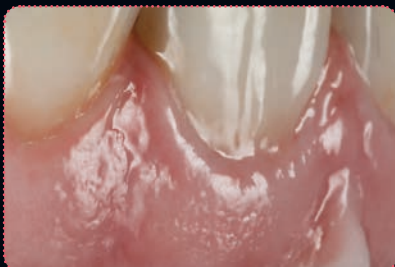

MiYO pink Structure: Design de tissus gingivaux.

2 MiYO PINK STRUCTURE

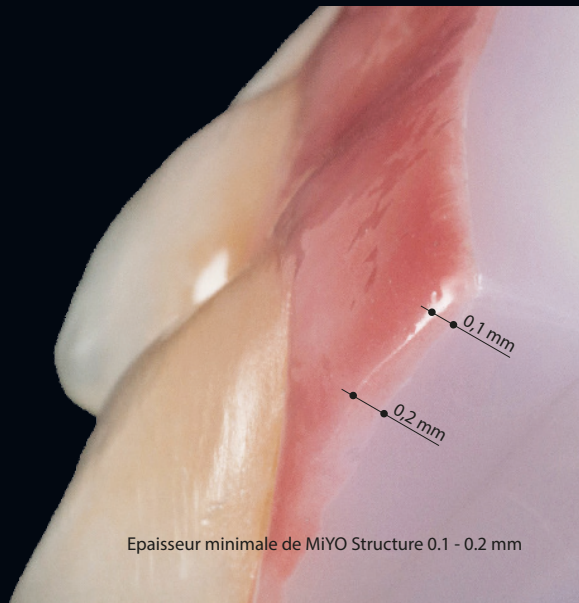

Epaisseur minimale de MiYO Structure 0.1 - 0.2 mm



MiYO COMPOSANTS SYSTÈMES:

TRANSLUCENT	COLOR	STRUCTURE
 Trans Shade A	 Snow	 Structure Window
 Trans Shade B	 Linen	 Structure Ghost
 Trans Shade C	 Fissure	 Structure Enamel
 Trans Shade D	MAMELON	 Structure Ice
 Trans Straw	 Mamelon Wheat	 Structure Blush
 Trans Sage	 Mamelon Coral	 HT Structure Window
 Trans Lotus	 Mamelon Pumpkin	 HT Structure Enamel
 Trans Clementine	HALO	
 Trans Storm	 Halo Spring	 Glaze Paste - fluor -
 Trans Cobalt	 Halo Autumn	 InSync Liquid - one for all -
 Trans Lumin		
 Trans Lumin plus		
 Trans Smoke		
 Trans Slate		
 Trans Sunflower		
 Trans Garnet		

MiYO PINK COMPOSANTS SYSTÈMES:

TRANSLUCENT	COLOR	STRUCTURE
 Trans Raspberry	 Flamingo	 Structure Orchid
 Trans Copper	 Crimson	 Structure Rouge
 Trans Midnight	 Plum	 Structure Frost
 Trans Carnation	 Merlot	
 Trans Garnet	 Sorbet	 Glaze Paste - no fluor - InSync Liquid - one for all -
	 Salmon	
	 Sable	
	 Thistle	
	 Venule	

INFORMATIONS TECHNIQUES:

	CTE (25-500 °C) [10 ⁻⁶ K ⁻¹]
MiYO Color	7,5 ± 0,5
MiYO Structure	7,4 ± 0,5
Glaze Paste	7,3 ± 0,5





Concessionnaire MiYO en Europe

Ventes Europe et soutien technique:

Jensen GmbH
Gustav-Werner-Straße 1
72555 Metzingen, Germany

Telefon 0800-857 32 30
info@jensendental.de
www.jensendental.de

Fabriqué par:

Chemichl AG
Landstrasse 114
9490 Vaduz, Liechtenstein
info@chemichl.com



... En savoir plus sur MiYO



GAN: 8000 | 2102
français